



TECHNIQUE
OPÉRATOIRE

enovis[™]

AGRAFES STATIQUES

AGRAFES STATIQUES

AGRAFES



INDICATIONS & CONTRE-INDICATIONS	3
TECHNIQUE CHIRURGICALE	4
RÉFÉRENCES	7

Novastep® S.A.S est un fabricant d'implants orthopédiques et ne pratique pas la médecine. Cette technique chirurgicale a été préparée en collaboration avec des professionnels de la santé agréés. Il incombe au chirurgien traitant de déterminer le traitement, la (les) technique(s) et le (les) produit(s) appropriés pour chaque patient.

Voir la notice pour la liste complète des effets indésirables potentiels, des contre-indications, des avertissements et des précautions.

Il est recommandé de suivre une formation avant d'effectuer sa première intervention chirurgicale. Tous les dispositifs non stériles doivent être nettoyés et stérilisés avant utilisation.

Les instruments à plusieurs composants doivent être démontés pour être nettoyés. Veuillez vous référer aux instructions de montage/démontage correspondantes, le cas échéant. N'oubliez pas que la compatibilité des différents systèmes de produits n'a pas été testée, sauf indication contraire dans l'étiquetage du produit.

Le chirurgien doit informer le patient de tous les risques pertinents, y compris de la durée de vie limitée du dispositif.

Certains implants/instruments ne sont pas disponibles sur tous les territoires. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant local.

INDICATIONS

Les agrafes statiques sont indiquées pour l'hallux valgus.

 **NOTE:** Les informations détaillées relatives à chaque dispositif médical figurent dans la notice d'utilisation. Se reporter à la notice pour une liste complète des effets secondaires, précautions d'emploi et instruction d'utilisation.



CONTRE-INDICATIONS

- Lorsqu'elle est utilisée pour fixer l'ostéotomie d'Akin dans le cadre d'une correction de l'hallux valgus, l'implantation d'agrafes statiques ne peut pas être utilisée comme une procédure seule.
- Destruction osseuse ou mauvaise qualité osseuse susceptible d'affecter la stabilité de l'implant.
- Hypersensibilité au nickel et/ou au chrome.

OSTÉOTOMIE DE VARISATION DE P1


1. PRÉPARATION DE L'ARTICULATION

Réaliser l'ostéotomie de varisation de P1 au moyen d'une scie oscillante et translater le fragment distal (**FIGURE 1** & **FIGURE 2**).

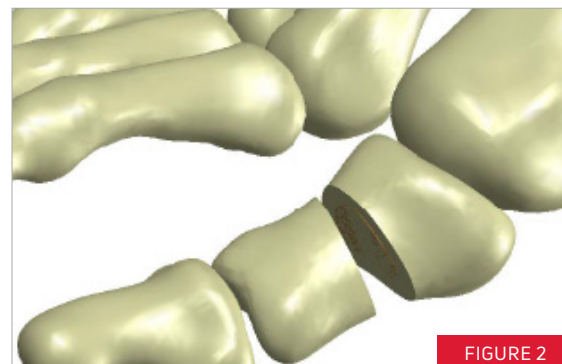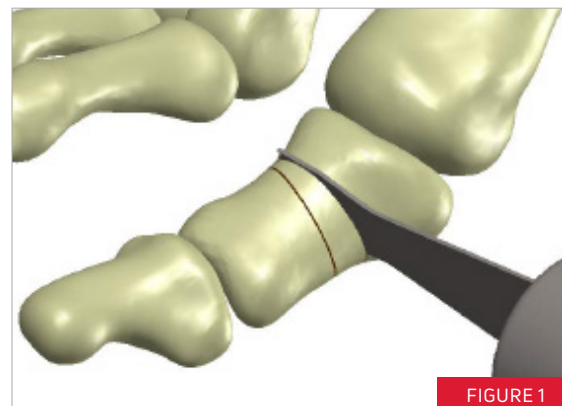

2. MISE EN PLACE DE L'AGRAFE

Mettre l'agrafe en place dans la pince et serrer les bras jusqu'à la position de verrouillage (**FIGURE 3**).

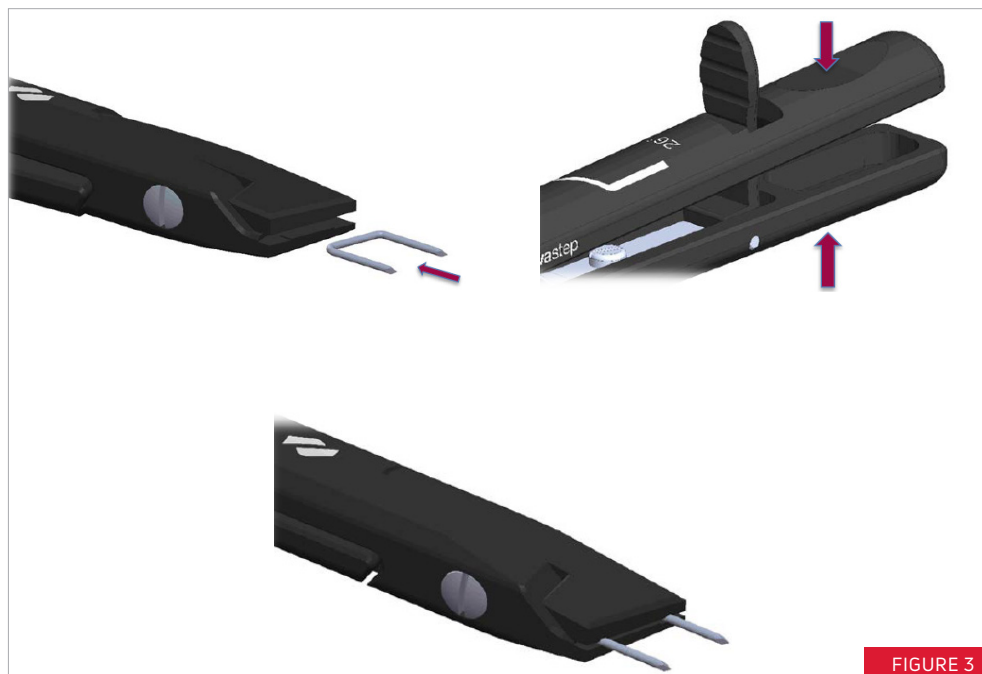

3. INSERTION DE L'AGRAFE

Insérer l'agrafe puis retirer la pince (**FIGURE 4**).

Terminer l'insertion de l'agrafe à l'aide de l'impacteur (**FIGURE 5**).

Vérifier la stabilité de l'ostéotomie.

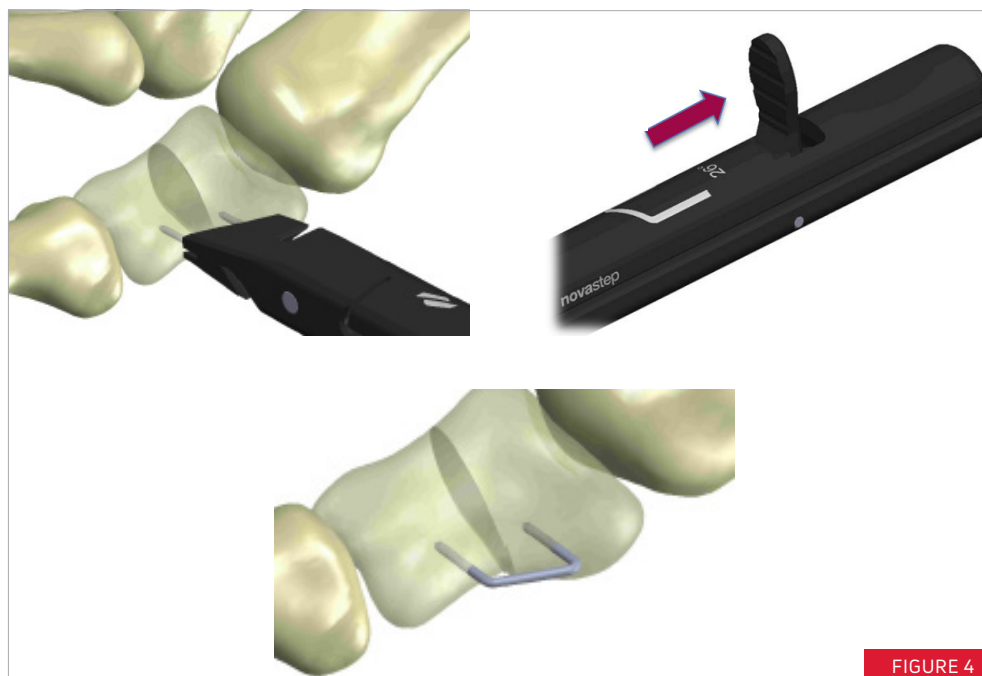


FIGURE 4

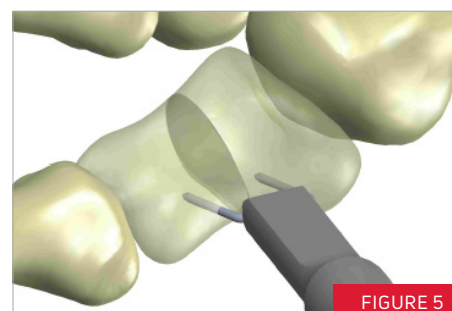


FIGURE 5

AGRAFES STATIQUES - EN COMPLÉMENT DE LA GAMME ARCAD®

RÉF	DÉSIGNATION
FS010008	AGRAFE STATIQUE 26° - 8mm
FS010010	AGRAFE STATIQUE 26° - 10mm
FS010108	AGRAFE STATIQUE 90° - 8mm
FS010110	AGRAFE STATIQUE 90° - 10mm

INSTRUMENTATION

RÉF	DÉSIGNATION
XFP02001	IMPACTEUR AGRAFES STATIQUES INCLINÉES
XMS01002	IMPACTEUR

enovis.

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F +33 (0) 9 70 29 18 95

Fabriquant : Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

*Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.*

RÉFÉRENCE: SSS-ST02-ED3-10-26-FR