




Brochure

Nexis[®] MIS Ø 2.7 mm

Vis compressive canulée biseautée

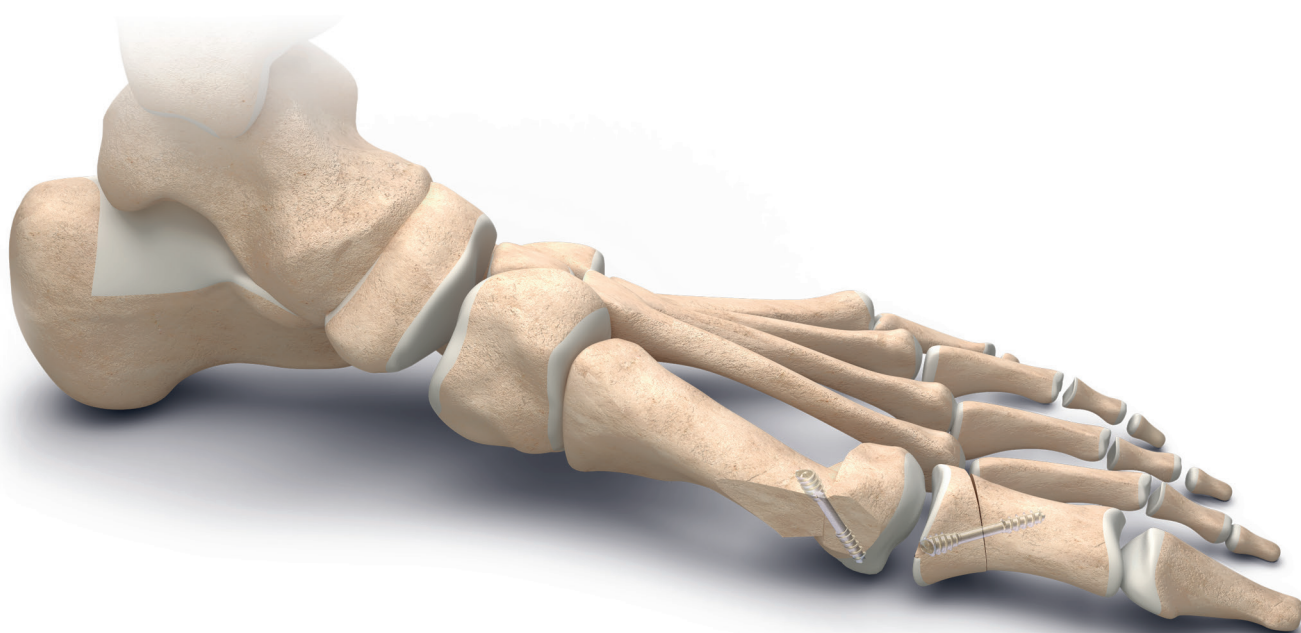


- . Empreinte Exact2-T, spécifique & universelle
- . Tête sur-biseautée elliptique
- . Maxi broche Extra-Sharp Ø 1.2 mm

La vis Nexis® MIS Ø 2.7 mm en alliage de titane est une **vis compressive canulée** avec une **tête sur-biseautée elliptique**.


Caractéristiques clés

1 Vis canulée : maxi-broche Extra-Sharp Ø 1.2 mm


2 Tête sur-biseautée elliptique

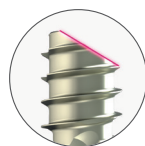


Biseau 30° :
Maximisation de l'ancrage cortical et préservation des tissus mous

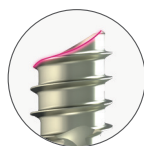


Sur-biseau elliptique :
Permet une rotation angulaire supplémentaire qui préserve l'enfouissement de la tête

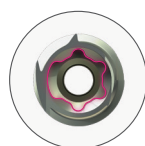

3 Empreinte Exact2-T
Spécifique & universelle

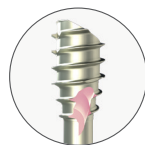

4 Double auto-taraudant elliptique
Réduction du couple d'insertion de la vis

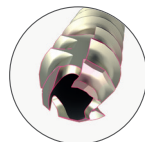


5 Auto-perforante & auto-taraudante

- Pointes acérées ultra pénétrantes
- Insertion facilitée

6 Double filetage profond

- Ancrage maximisé
- Compression optimale

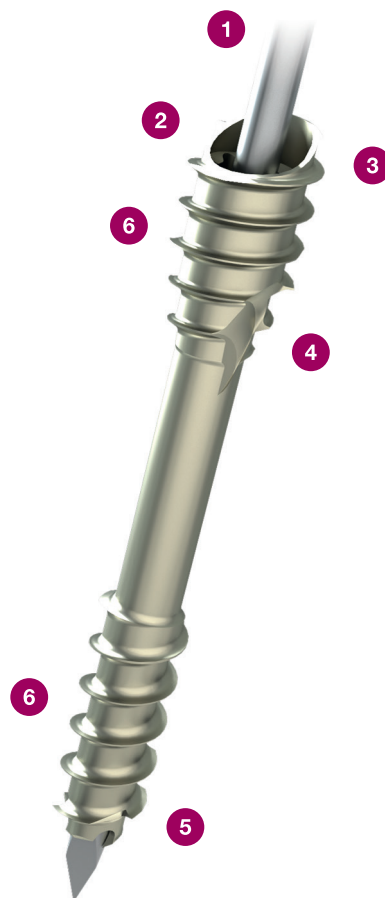

Gamme optimisée
Vis disponibles en longueur
14 à 30 mm.

Instrumentation dédiée

Maxi broche Extra-Sharp

Diamètre Ø 1.2 mm : offre une plus grande rigidité.
Pointe affûtée : permet une insertion angulée facilitée.



Tournevis Exact2-T8

L'empreinte Exact2-T8 :


- . **Spécifique** : indexation aisée du tournevis Exact2-T8.
- . **Universelle** : retrait facilité avec une instrumentation standard.



L'empreinte Exact2-T8 assure le positionnement de l'embout du tournevis dans une position unique.
Le marquage laser et le biseau du tournevis Exact2-T8 facilitent le positionnement exact de la tête de vis.



Mini-boîte Nexis® MIS

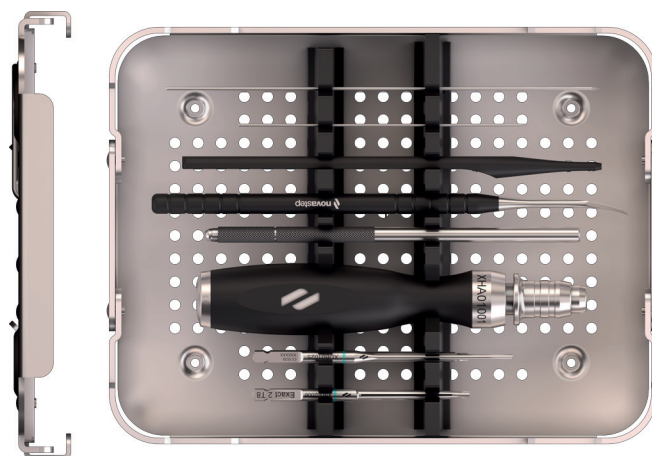

En option dans la boîte **Nexis®** avant-pied ForefootCOMPLETE

Références

Vis Nexis® MIS Ø 2.7 mm



Longueur (mm)	Référence
14 mm	SC090014
16 mm	SC090016
18 mm	SC090018
20 mm	SC090020
22 mm	SC090022
24 mm	SC090024
26 mm	SC090026
28 mm	SC090028
30 mm	SC090030


K-Wire Ø 1.2 mm

Description	Référence
K-Wire Ø 1.2 lg 80 TR/RD *	33-T10-R-12-080 *
K-Wire Ø 1.2 lg 100 TR/RD	33-T10-R-12-100
K-Wire Ø 1.2 lg 150 TR/RD **	33-T10-R-12-150 **


* Optionnel dans la boîte ForefootCOMPLETE.
** Optionnel dans la boîte Nexis® MIS.

Indications

Ostéotomie en Chevron

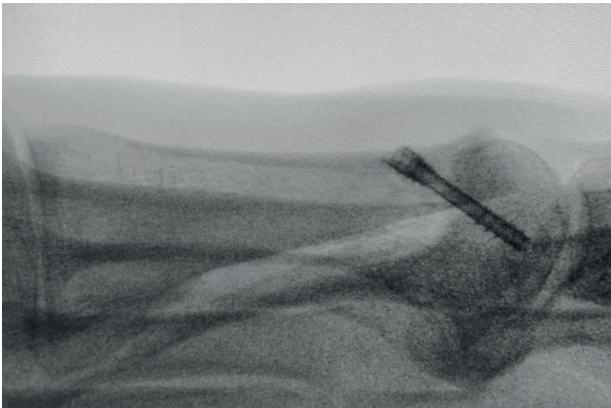

Ostéotomie d'Akin

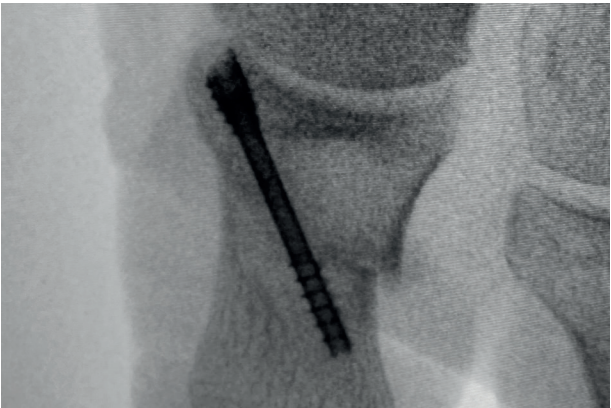

Recommandation :

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés. Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe IIa-CE1639.

Novastep :

2, Allée Jacques Frimot - 35000 RENNES - France
Tel : + 33 (0) 2 99 33 86 50 / Fax : + 33 (0) 9 70 29 18 95
contact@novastep-ortho.com / www.novastep-ortho.com

Référence : Nex-MIS-L-Ed1-09-21-FR