



Implants Intramédullaires Arthrodèse Interphalangienne IPP & IPD Small / Medium / IPD

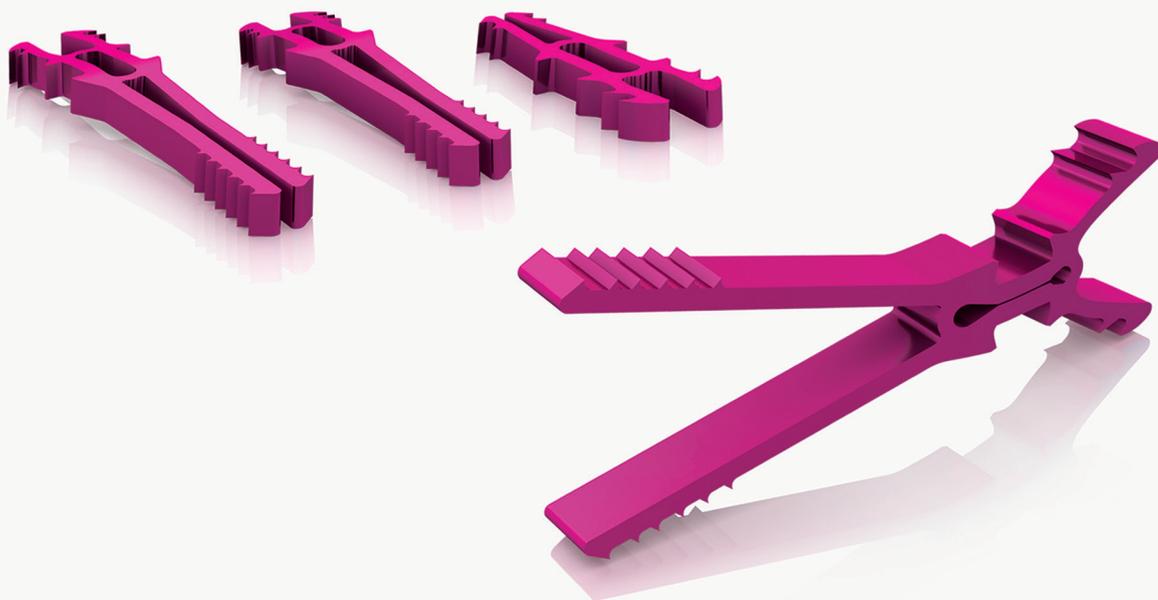

- . Expansion Mécanique - Titane Pur
- . Ancrage Per-opératoire Immédiat
- . Anti-rotation, Anti-migration
- . Implant Droit ou Angulé 10°

L'implant intramédullaire Lync® est destiné à l'arthrodèse des phalanges de l'articulation interphalangienne distale de la main et des articulations interphalangiennes proximale et distale du pied. Il est particulièrement recommandé pour le traitement des orteils en marteau. Sa conception anti-rotative réduit les risques de rotation et d'arrachement. Sa capacité d'expansion et sa géométrie crantée permettent un ancrage per-opératoire important limitant ainsi le risque de migration.

La Solution Lync®

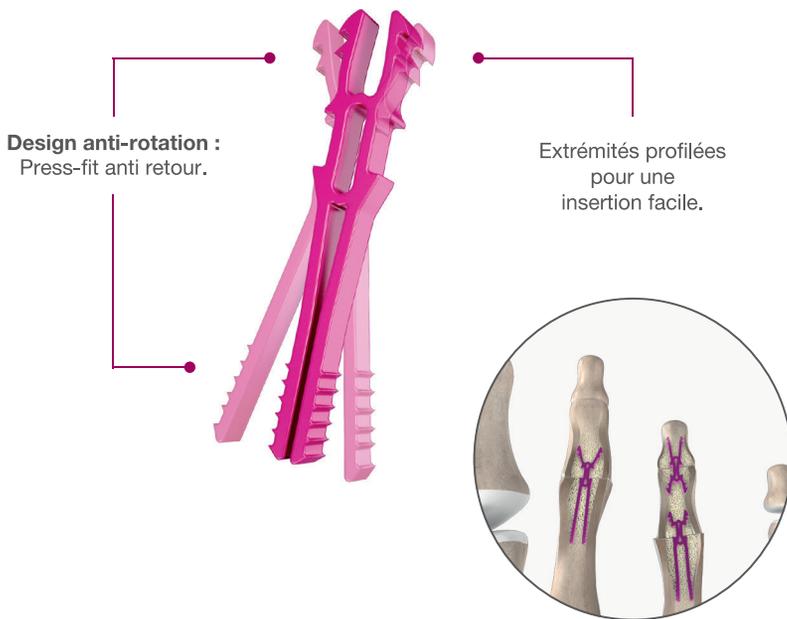

Indications

Les implants intra-médullaires Lync® sont indiqués en cas d'arthrite et de défaut d'alignement osseux (orteil en marteau, orteil en griffe et orteil en maillet) de la main et du pied.

Caractéristiques

Ancrage initial par expansion mécanique.


Réduction du gap interphalangien par impaction et maintien de l'ancrage par effet press-fit.

Resistance mécanique élevée.

Utilisation à température ambiante.

Titane pur anodisé (absence de Nickel) - Radio-opaque.

La Gamme d'Implants Lync®

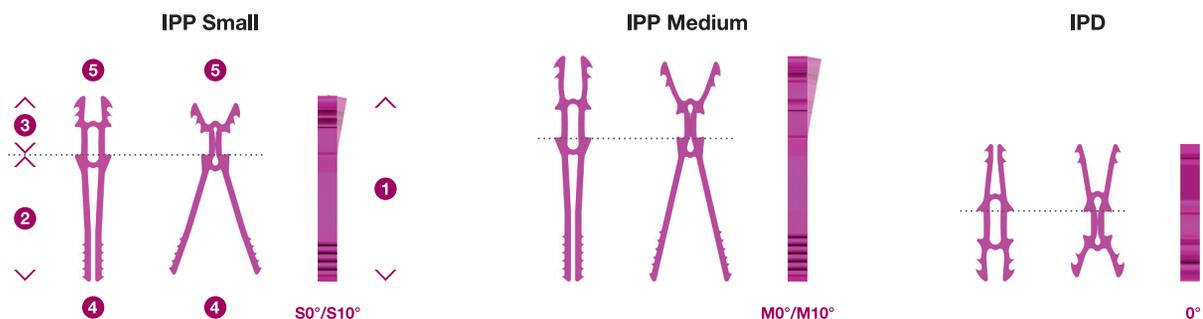

	Small	Medium	IPD
1 - Longueur Totale	16 mm	20 mm	12 mm
2 - Longueur Proximale	11 mm	13 mm	6 mm
3 - Longueur Distale	5 mm	7 mm	6 mm
4 - Ouverture Proximale Initiale / Finale*	2 / 8 mm	2 / 8.5 mm	3.5 / 4.0 mm
5 - Ouverture Distale Initiale / Finale*	3,5 / 5,5 mm	3,5 / 4,5 mm	2 / 5 mm


* Ouverture maximale.




Instrumentation Minimale, Mise en Place Simplifiée

3 instruments seulement* !

L'instrumentation Lync®, agencée dans un module spécifique, se compose principalement d'un foret, d'une râpe et d'une pince Lync®. La technique chirurgicale est simplifiée et le temps opératoire réduit.

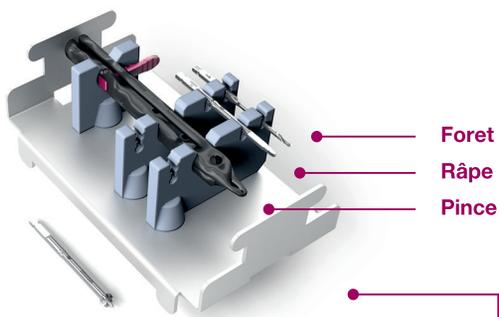

* Optionnel : Fraise de re-surfçage.

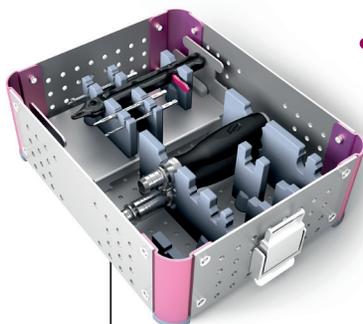


ForefootEXACT

Lync® - Solution Avant Pied

L'instrumentation Novastep Avant Pied est construite autour d'une plateforme modulaire et intuitive, permettant de regrouper tout ou partie de la gamme avant pied (Implant intramédullaire Lync®, Agrafes Arcad®, Vis Nexis®, Fraises percutanées) dans 1 set forefootEXACT ou forefootCOMPLETE.


Cette solution modulaire permet d'adapter les ancillaires aux pratiques du ou des chirurgiens pour faciliter la logistique au sein des blocs opératoires.

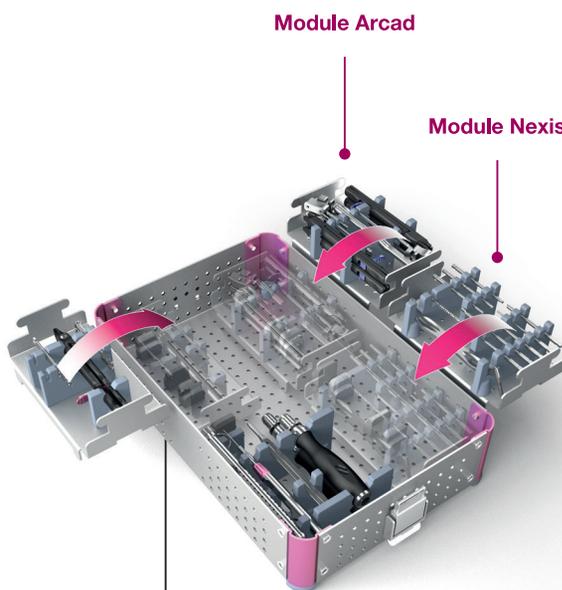

ForefootCOMPLETE


Pince : Verrouiller et Déployer !

D'une seule main, la pince maintient l'implant et déploie les branches de celui-ci pour les ancrer dans le canal intramédullaire. Insertion simple et rapide.

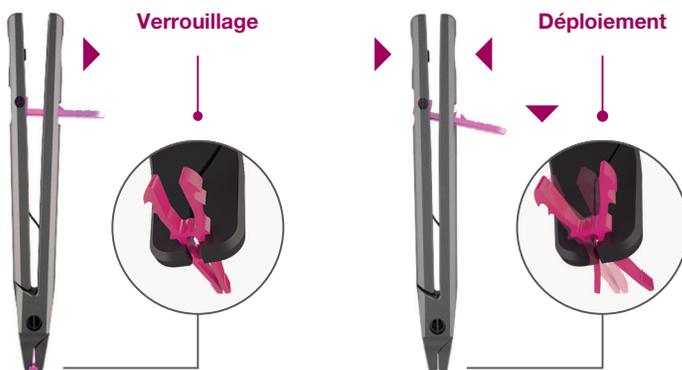

Références

Lync®

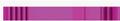	Ref	Désignation
	CM010030	Lync® S0°
	CM010031	Lync® S10°
	CM010010	Lync® M0°
	CM010011	Lync® M10°
	CM010040	Lync® IPD

Instrumentation

Ref	Désignation
XFP04001	Pince
XDB01003	Foret Ø 2.3
XRA01002	Râpe
XHA01001	Manche AO
XRE01002	Fraise à surfer - Optionnel

Novastep - La Gamme Avant Pied



NEXIS® :

Snap-off screw Ø 2
Vis compressive Ø 2.3
Vis compressive biseautée Ø 2.7
Vis compressive Ø 2.9
Vis compressive Ø 3.5
Vis compressive Ø 4



AIRLOCK® :

Plaques MTP
Plaques Utility
Plaques d'ostéotomie basale



FRAISES PERCUTANÉES :

Shannon Corta Ø 2 Lg 8 mm
Shannon Recta Ø 2 Lg 12 mm
Shannon Helical Ø 2 Lg 12 mm
Shannon Longa Ø 2.2 Lg 22 mm
Shannon Larga Ø 3 Lg 20 mm
Shannon X-Larga Ø 3 Lg 30 mm
Wedge 3.1 Ø 2.9 Lg 13 mm
Wedge 4.1 Ø 2.9 to 4.3 Lg 13 mm



ARCAD® :

Agrafes compressives
Agrafes statiques*

*En complément de la gamme Arcad®.

Novastep :

2, Allée Jacques Frimot
35000 RENNES - France.
Tel : + 33 (0) 2 99 33 86 50 / Fax : + 33 (0) 9 70 29 18 95
contact@novastep-ortho.com
www.fr.novastep.life

Recommandation :

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés. Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe IIa-CE1639.