

B

BROCHURE

enovis™

LYNC®

IMPLANTS INTRAMÉDULLAIRES IPP & IPD


IMPLANT INTRAMÉDULLAIRE



LYNC®

L'implant intramédullaire Lync® est destiné à l'arthrodèse des articulations interphalangiennes proximale et distale du pied. Il est particulièrement recommandé pour le traitement des orteils en marteau. Sa conception anti-rotative réduit les risques de rotation et d'arrachement. Sa capacité d'expansion et sa géométrie crantée permettent un ancrage per-opératoire important limitant ainsi le risque de migration.

SOLUTION LYNC®

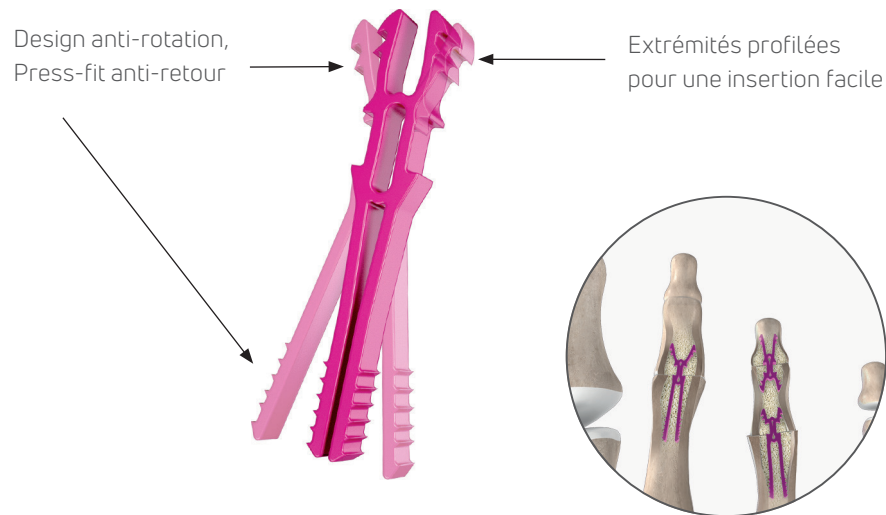


INDICATION

Les implants intramédullaires Lync® sont indiqués pour l'arthrite et les défauts d'alignement osseux (orteil en marteau, orteil en griffe, orteil en maillet) des orteils.

CARACTÉRISTIQUES

- . Ancrage initial par expansion mécanique.
- . Réduction du gap interphalangien par impaction et maintien de l'ancrage par effet press-fit.
- . Résistance mécanique élevée.
- . Utilisation à température ambiante.
- . Titane pur anodisé (absence de Nickel) - Radio-opaque.

GAMME

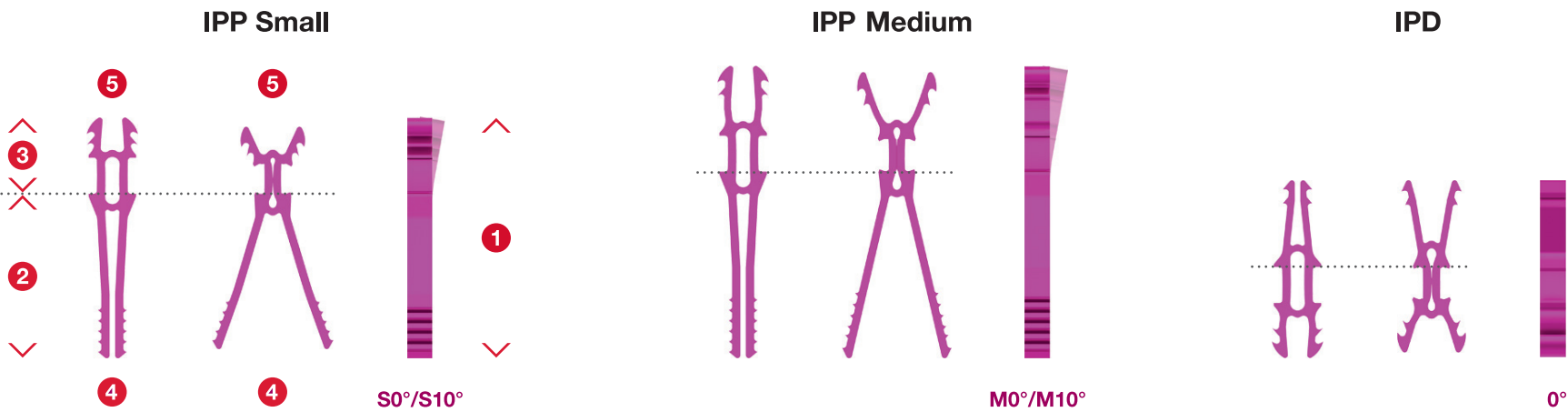

	SMALL	MEDIUM	IPD
LONGUEUR TOTALE	16 mm	20 mm	12 mm
LONGUEUR PROXIMALE	11 mm	13 mm	6 mm
LONGUEUR DISTALE	5 mm	7 mm	6 mm
OUVERTURE PROXIMALE	2 / 8 mm	2 / 8.5 mm	3.5 / 4 mm
OUVERTURE DISTALE	3.5 / 5.5 mm	3.5 / 4.5 mm	2 / 5 mm




INSTRUMENTATION LYNC®

3 INSTRUMENTS

L'instrumentation Lync®, agencée dans un module spécifique, se compose principalement d'un foret, d'une râpe et d'une pince Lync®. La technique chirurgicale est simplifiée et le temps opératoire réduit.

Module Lync®

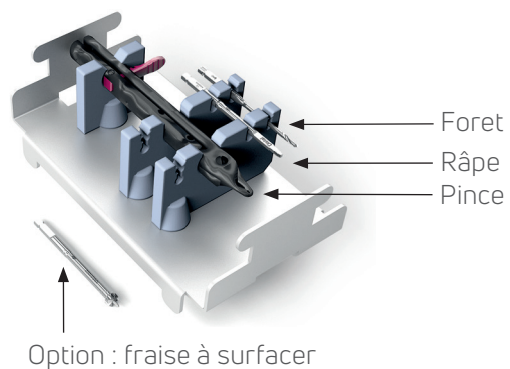


SOLUTION MODULAIRE


L'instrumentation Novastep Avant Pied est construite autour d'une plateforme modulaire et intuitive, permettant de regrouper tout ou partie de la gamme avant pied (Implant intramédullaire Lync®, Agrafes Arcad®, Vis Nexis®, Fraises percutanées) dans 1 set forefootEXACT ou forefootCOMPLETE.

Cette solution modulaire permet d'adapter les ancillaires aux pratiques du ou des chirurgiens pour faciliter la logistique au sein des blocs opératoires.

ForefootEXACT

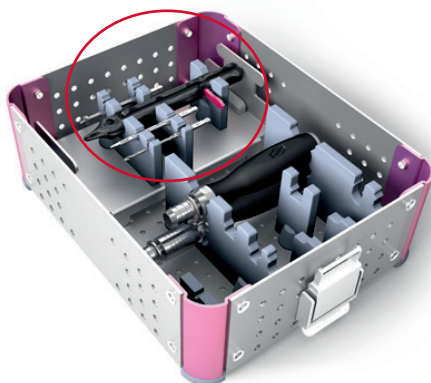


ForefootCOMPLETE

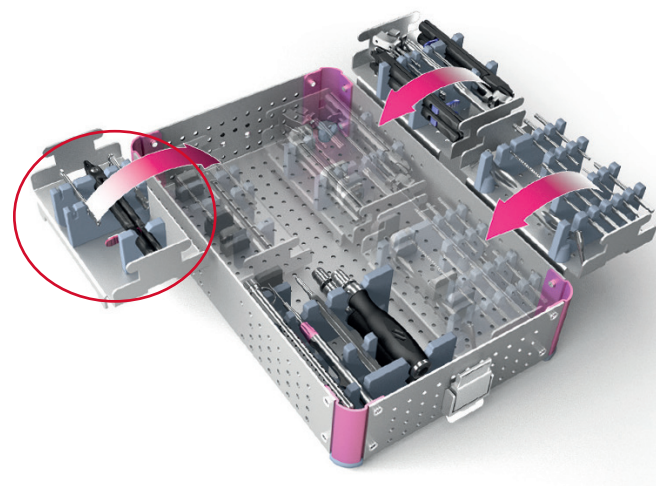

INSTRUMENTATION LYNC®

PINCE LYNC® : VERROUILLER ET DÉPLOYER

D'une seule main, la pince maintient l'implant et déploie les branches de celui-ci pour les ancrer dans le canal intramédullaire. Insertion simple et rapide.

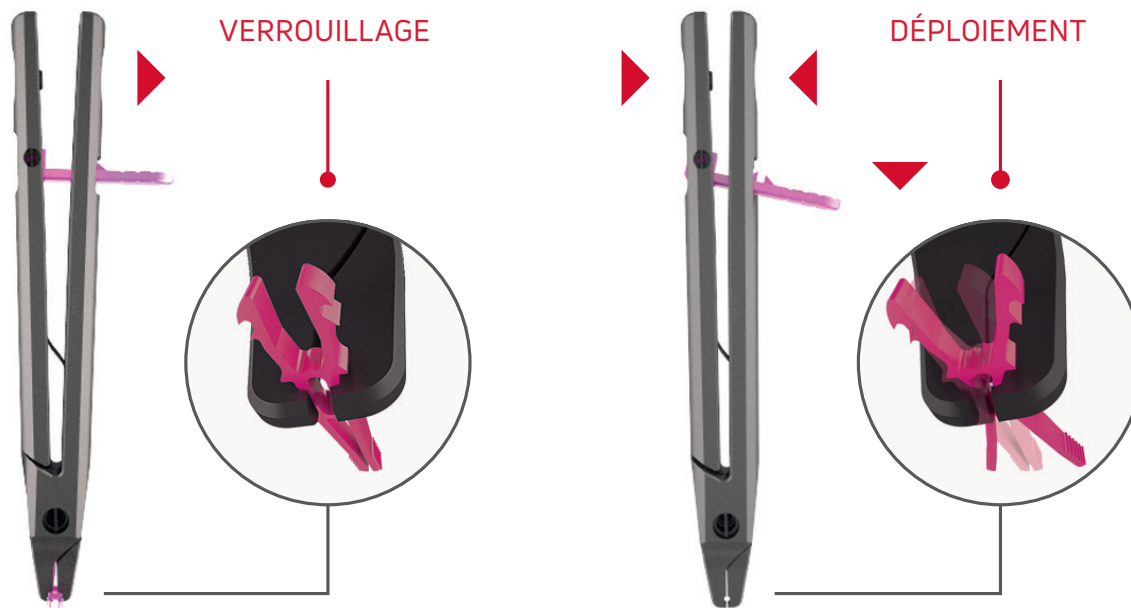

RÉFÉRENCES

LYNC®

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CM010030	LYNC® S0
CM010031	LYNC® S10
CM010010	LYNC® M0
CM010011	LYNC® M10
CM010040	LYNC® DIP

INSTRUMENTATION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
XFPO4001	PINCE
XDB01003	FORET Ø2.3
XRA01002	RÂPES
XHA01001	MANCHE A0
XRE01002	FRAISE À SURFACER - OPTION



T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 95

Legal manufacturer: Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

*Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.*

RÉFÉRENCE : LYN-L-ED9-06-25-FR