

B

BROCHURE

enovis™

PECA[®] COMPRESSIVE

VIS COMPRESSIVE BISEAUTÉE Ø4

VIS



INDICATIONS MULTIPLES

Les vis d'ostéosynthèse sont indiquées pour le traitement de l'arthrose, l'hallux valgus, métatarsalgie, et autres défauts d'alignement osseux (pied creux, pied plat, défaut d'alignement dû à un traumatisme antérieur).

Les vis PECA® Compressives peuvent être utilisées pour réaliser des arthrodèses dans les os du médio-pied, les métatarses et les phalanges du pied, seules ou en association avec une plaque Airlock®.

CHIRURGIE À CIEL OUVERT




MTP




TALO-NAVICULAIRE

CHIRURGIE PERCUTANÉE

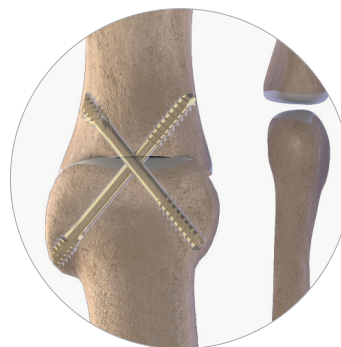

MTP

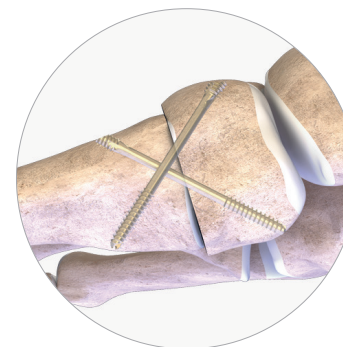

LAPIDUS



ARTHRODÈSE MTP - POST-OPÉATOIRE




ARTHRODÈSE MTP - POST-OPÉATOIRE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Les vis PECA® Compressives sont indiquées pour la fixation d'ostéotomie & d'arthrodèse du pied.

Cette gamme de vis compressives à tête biseautée permet d'offrir un montage stable en maximisant l'ancrage cortical tout en préservant les tissus mous.

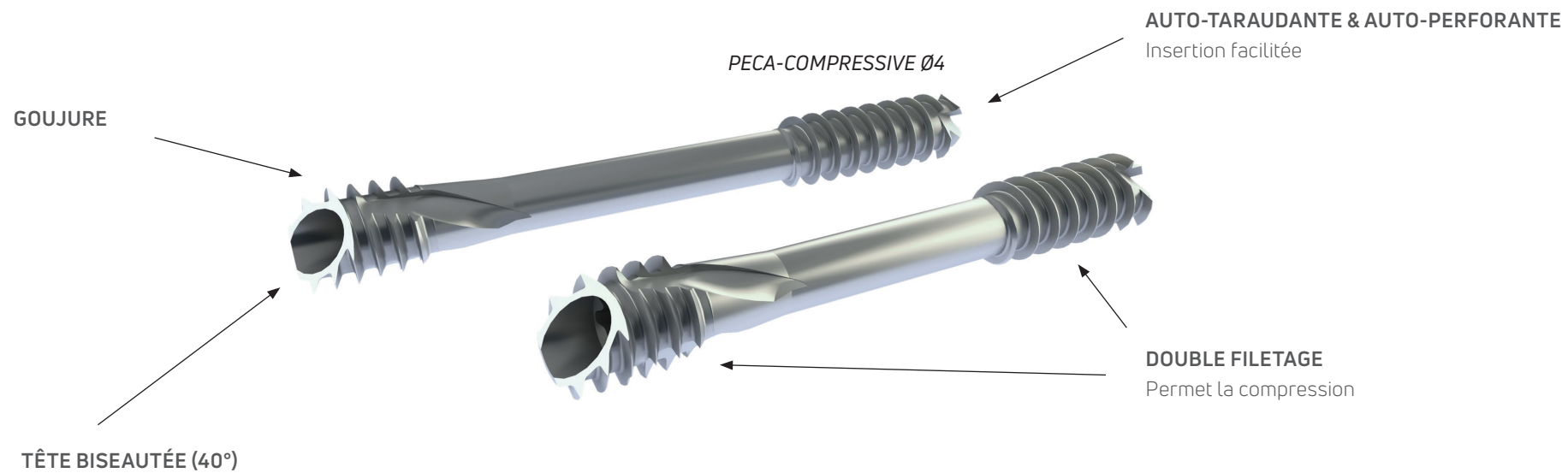

DESIGN BISEAUTÉ



TÊTE BISEAUTÉE

Ancrage cortical maximisé et préservation
des tissus mous

VS




TÊTE CLASSIQUE


Compromis entre enfouissement de la
tête et ancrage cortical

EMPREINTE EXACT2-T

Permet le positionnement exact de la tête biseautée. Le détrompeur permet le positionnement de l'embout du tournevis dans une position unique.

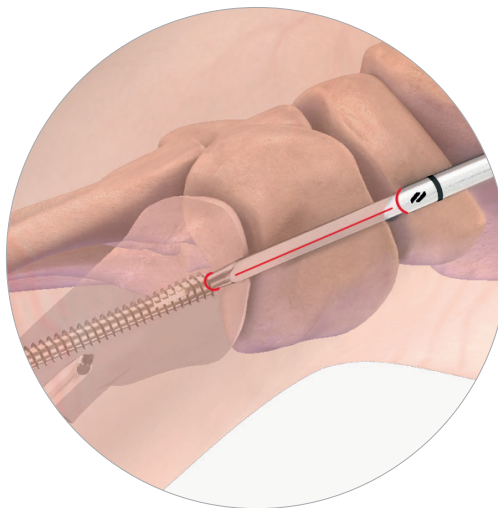

EMPREINTE EXACT2-T

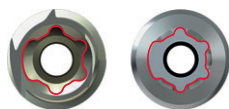

SPÉCIFIQUE

Permet le positionnement exact de la tête biseautée.


UNIVERSELLE

Permet le retrait avec une instrumentation standardisée.




INSTRUMENTATION DÉDIÉE

- Les vis PECA® Compressives Ø 4 mm peuvent être utilisées :
 - Avec le kit PECA® avec ajout optionnel d'une fraise à chambrer
 - Avec le kit AIRLOCK® avec ajout de l'instrumentation PECA-C®

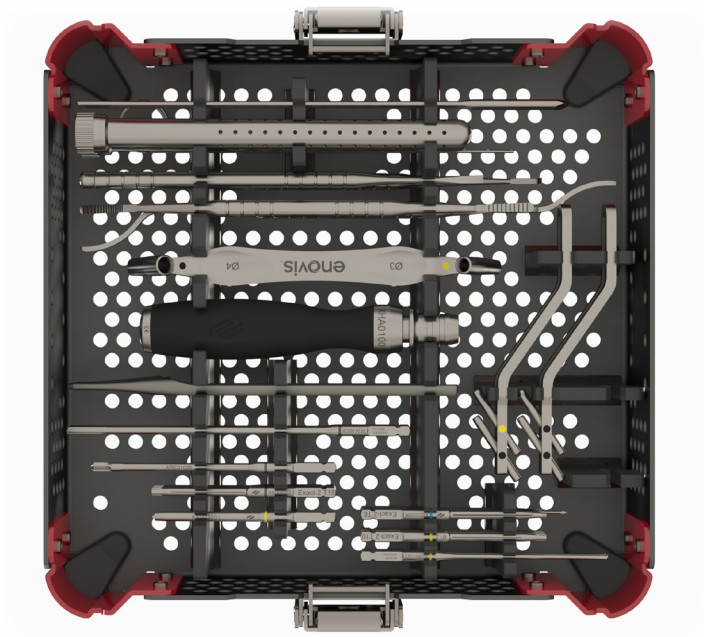

SET PECA®

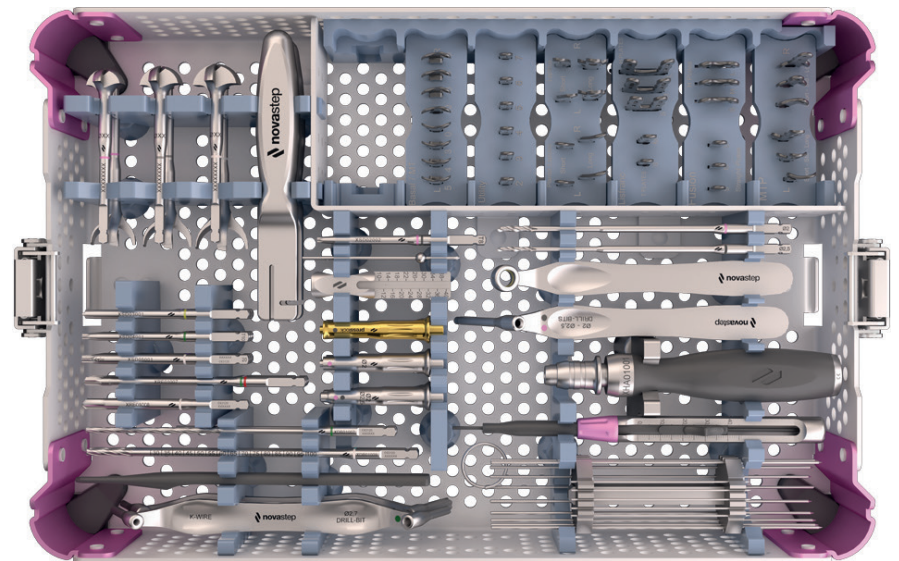

SET AIRLOCK®

RÉFÉRENCES

VIS PECA® COMPRESSIVE

LONGUEUR	RÉFÉRENCE
18mm	PS060118
20mm	PS060120
22mm	PS060122
24mm	PS060124
26mm	PS060126
28mm	PS060128
30mm	PS060130
32mm	PS060132
34mm	PS060134
36mm	PS060136
38mm	PS060138
40mm	PS060140
42mm	PS060142
44mm	PS060144
46mm	PS060146
48mm	PS060148
50mm	PS060150
55mm	PS060155
60mm	PS060160

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES PECA® COMPRESSIVE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CKW02005 ⁽¹⁾	BROCHE Ø1.6 LG 150 TR/RD
XDB01018	FORET AO Ø3.2
XSD04004	EMBOUT AO EXACT2-T15
XGA01009	RÉGLET LG 150
XRE01007 ⁽²⁾	FRAISE À CHAMBRER Ø3.7

⁽¹⁾ Broche vendue séparément

⁽²⁾ Option

enovis.

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant: Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-nsp@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

*Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.*

RÉFÉRENCE: PECA-2.0-C-L-ED4-01-26-FR